

## 产品手册

H\_MICA\*001 Luciferase B16-F10 Cell Line

H\_MICA\*001 Luciferase B16-F10 细胞系

For research use only!

本品仅供科研使用，严禁用于治疗！

版本号：V2.8

## 目录

一、	产品基本信息及组分.....	3
二、	包装、运输及储存.....	3
三、	材料准备.....	4
1.	细胞培养、冻存、复苏试剂准备.....	4
2.	试剂耗材准备.....	4
四、	细胞培养、复苏、冻存.....	5
1.	H_MICA*001 Luciferase B16-F10 Cell Line 细胞复苏.....	5
2.	H_MICA*001 Luciferase B16-F10 Cell Line 细胞传代.....	5
3.	H_MICA*001 Luciferase B16-F10 Cell Line 细胞冻存.....	5
五、	验证结果.....	6
1.	Luciferase 检测实验.....	6
1)	报告基因检测.....	6
2)	验证结果.....	6
2.	流式检测蛋白表达.....	7
	使用许可协议: .....	8
	附录 H_MICA*001 氨基酸序列 (Q29983) .....	9

## 一、产品基本信息及组分

### 基本信息

产品编号	产品名称	规格
GM-C30325	H_MICA*001 Luciferase B16-F10 Cell Line	1 kit

### 产品组成

产品编号	产品名称	规格	数量	储存
GM-C31074	H_MICA*001 Luciferase B16-F10 Cell Line #1	5E6 Cells/mL	1 管	-196°C
GM-C31075	H_MICA*001 Luciferase B16-F10 Cell Line #13	5E6 Cells/mL	1 管	-196°C
GM-C31076	H_MICA*001 Luciferase B16-F10 Cell Line #19	5E6 Cells/mL	1 管	-196°C

## 二、包装、运输及储存

1. 细胞系产品干冰运输，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
2. 接触产品请带手套。请收到产品立即确认产品是否为冻存状态，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
3. 本产品相关 Assay，应在二级生物安全实验室或生物安全柜中进行。

### 三、 材料准备

#### 1. 细胞培养、冻存、复苏试剂准备

细胞复苏培养基:	DMEM+10% FBS+1% P.S
细胞生长培养基:	DMEM+10% FBS+1% P.S+10 µg/mL Blasticidin+0.5 µg/mL Puromycin
细胞冻存培养基:	90% FBS+10% DMSO
Assay Buffer	DMEM+1% FBS+1% P.S

#### 2. 试剂耗材准备

##### 试剂准备

Reagent	Specification	Manufacturer/Catalogue No.
Puromycin	25 mg	Genomeditech/GM-040401-1
Blasticidin	10 mg	Genomeditech/GM-040404-1
Pen/Strep	100 mL	Thermo/15140-122
Fetal Bovine Serum	500 mL	Thermo/10099141
DMEM	500 mL	gibco/C11995500BT
Anti-MICA*001/MICB hIgG1 Antibody(36 NF / G236A)	/	Genomeditech/GM-48843AB
96 Well White Polystyrene Microplate	96-well	Corning/3903
GMOne-Step Luciferase Reporter Gene Assay Kit	1000T	Genomeditech/GM-040503C

##### 重要仪器

Equipment	Manufacturer/Catalogue No.
细胞计数仪	ThermoFisher Scientific/Countess 3
酶标仪	Moleculardevices/SpectraMax L

## 四、 细胞培养、复苏、冻存

### 1. H\_MICA\*001 Luciferase B16-F10 Cell Line 细胞复苏

- a) 37°C水浴锅预热培养基，加入预热后的完全培养基 5 mL 至 15 mL 离心管。
- b) 从液氮中取出冻存细胞并迅速放入 37°C恒温水浴锅，将细胞液面浸至水面以下不断摇动至融化。
- c) 用 70%乙醇擦拭冻存管外部以降低污染的几率。在生物安全柜或超净台中将冻存管中的细胞悬液转移到步骤 a) 的离心管中，轻轻混匀，1000 rpm，离心 3 min，使细胞沉淀，弃上清。
- d) 使用 1 mL 完全培养基重悬，可取出部分使用台盼蓝染色计数活细胞，活细胞 $\geq 3 \times 10^6$  cells/mL。
- e) 通过补加完全培养基的形式，调整活细胞密度到  $3 \times 10^5$  cells/mL，根据细胞悬液总体积，将细胞接种到合适的培养皿中。

### 2. H\_MICA\*001 Luciferase B16-F10 Cell Line 细胞传代

- a) 当细胞密度大于 80%，即可进行细胞传代。推荐细胞传代比例为 1:3-1:4，2-3 天传代。
- b) 将皿或培养瓶中的培养液弃去，10 cm 皿加 2 mL PBS 润洗 1 次。
- c) 弃 PBS，加 1 mL 0.25% Trypsin-EDTA 消化液，37°C 消化 30-60 s，显微镜下观察。
- d) 待细胞变圆，细胞间隙明显，部分细胞刚开始脱离瓶壁时，加 1 mL 左右完全培养液混匀终止消化，将细胞小心吹打下来，1000 rpm 室温离心 3 min。
- e) 弃上清，细胞沉淀用完全培养液重悬，根据传代前细胞密度分盘（根据培养皿面积和细胞密度计算，传代后细胞密度为 30-40%）。

### 3. H\_MICA\*001 Luciferase B16-F10 Cell Line 细胞冻存

- a) 使用 1000 rpm，3 min 离心收集细胞。
- b) 使用预冷细胞冻存液（90% FBS + 10% DMSO）重悬细胞，细胞密度调整为  $5 \times 10^6$  cells/mL，每管 1 mL 分装到细胞冻存管中。
- c) 拧紧盖子，适当标记后，将冻存管置于梯度降温盒中，-80°C下保存至少 1 天，尽快转移至液氮中。

## 五、 验证结果

### 1. Luciferase 检测实验

操作步骤可调整优化。本次实验使用 H\_MICA\*001 Luciferase B16-F10 Cell Line 三株单克隆细胞作为被检测细胞，Conc.01 细胞量为  $5 \times 10^4$  cells，1.5 倍梯度稀释。

#### 1) 报告基因检测

参考报告基因检测说明书。

H_MICA*001 Luciferase B16-F10 Cell Line #1	PBS Control	50000 cells	1950 cells
	100	2897025	151873
H_MICA*001 Luciferase B16-F10 Cell Line #13	PBS Control	50000 cells	1950 cells
	233	9077911	473892
H_MICA*001 Luciferase B16-F10 Cell Line #19	PBS Control	50000 cells	1950 cells
	134	6157486	264711

#### 2) 验证结果

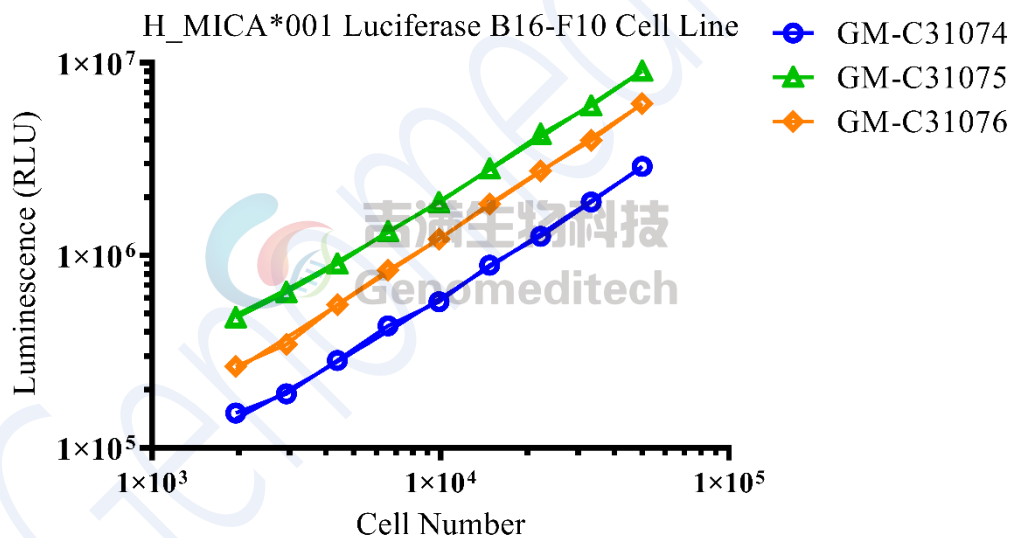


Fig 1. Luciferase 检测结果

## 2. 流式检测蛋白表达

操作步骤可调整优化，对于本实验，推荐H\_MICA\*001 Luciferase B16-F10 Cell Line细胞量为 $2 \times 10^5$  cells/管。操作步骤如下：

- a) 实验前，需等待细胞生长速率稳定，约需要3-5 d。
- b) 实验当天，消化H\_MICA\*001 Luciferase B16-F10 Cell Line，取100  $\mu$ L细胞悬液（细胞计数后用PBS调整浓度为 $2 \times 10^6$  cells/mL），加入适量的表面抗体（Anti-MICA\*001/MICB hIgG1 Antibody(36 NF G236A)），4°C避光孵育1 h。
- c) 加入1-2 mL PBS冲洗，重复此步骤。
- d) 加入荧光标记的二抗，4°C避光孵育30 min。
- e) 1000 rpm离心5 min，去除上清，用300  $\mu$ L PBS重悬。
- f) 立即上机检测。
- g) 验证结果。

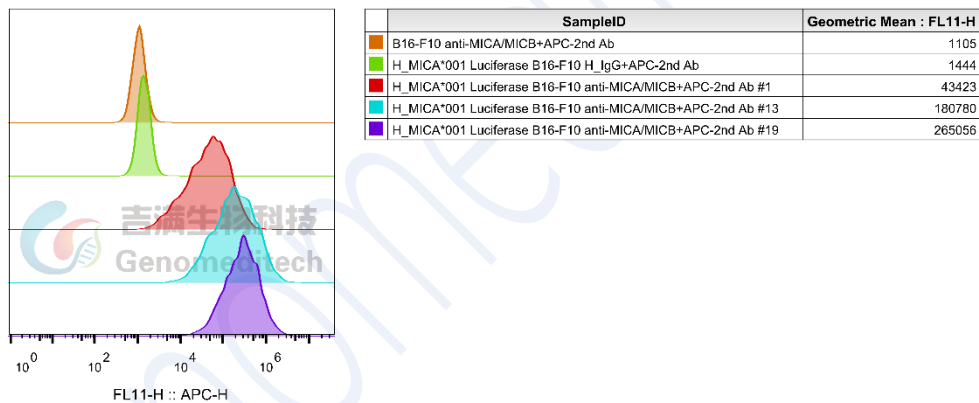


Fig 2. 流式验证结果

## 使用许可协议:

吉满生物将其许可材料的所有知识产权，独占的、不可转让的和不可发放分许可的权利授予给被许可人；吉满生物将保留许可材料、细胞系历史包、子代、包括修改材料中许可材料的所有权。

在吉满生物和被许可方之间，被许可方不允许以任何方式修改细胞系。被许可方不得分享、分发、出售、再授权或以其他方式将被许可材料、子代提供给其它实验室、部门、研究机构、医院、大学或生物技术公司等第三方非基于外包被许可人的研究目的而使用。

详情请参考吉满细胞系授权协议。

Genomeditech



## 附录 H\_MICA\*001 氨基酸序列 (Q29983)

MGLGPVFLLLAGIFPFAPPAAAAEPHSLRYNLTVLSWDGVSQSGFLTEVHLDGQPFLRCD  
RQKCRAPQGQWAEDVLGNKTWDRETRDLTGNGKDLRMTLAHIKDQKEGLHSLQEIRV  
CEIHEDNSTRSSQHFYYDGELFLSQNLETKEWTMPQSSRAQTLAMNVRNFLKEDAMKTK  
THYHAMHADCLQELRRYLKSGVLLRRTVPPMVNVTRSEASEGNITVTCRASGFYPWNIT  
LSWRQDGVSLSHDTQQWGDVLPDNGTYQTWVATRICQGEEQRFTCYMEHSGNHSTHP  
VPSGKVLVLQSHWQTFHVSAAAAAIFVIIIIFYVRCKKKTSAAEGPELVSLQVLDQHPV  
GTSDHRDATQLGFQPLMSDLGSTGSTEGA

Genomeditech